



DEUTSCHE VERSION

# Struzzo

## AUFRECHT UND MOBIL

Dieses Hilfsmittel ermöglicht Anwendern eine aufrechte Haltung einzunehmen und beizubehalten, während sie sich ohne Hilfestellung frei in Innenräumen fortbewegen können.

Art. N. AV 23 2420

Einfache, werkzeuglose Einstellungen

Geeignet für Anwender mit Körpergröße zwischen cm 140 und 200 und einem Körpergewicht bis zu 140 kg.



### VEREINFACHTER ZUGANG :

<1> Sicherer und einfacher Zugang durch die höhengleiche Einstellung des Hilfsmittelsitzes mit der ausgehenden Sitzposition. Während des Sitzwechsels vom Rollstuhl auf das mobile Stehgerät, kann der Sitz, über die Höheneinstellung des Gerätes, im Gegensatz zum vorherigen Modell, stets waagrecht und parallel zur Sitzhöhe des Anwenders bleiben.

<2> Die, voneinander unabhängigen und in der Tiefe einstellbaren, beweglichen Fussplatten, reduzieren die Distanz zwischen, dem, sich im Rollstuhl befindlichen – oder sitzenden Anwender und der Struktur des Hilfsmittels. Dies erlaubt eine unterstützte Platzierung der Füße auf dem Hilfsmittel. Die Fussplatten können jederzeit eingestellt werden, auch wenn der Anwender sich schon auf dem Gerät befindet.

### 1 - HÖHENVERSTELLUNG DER GRUNDSTRUKTUR

Der tragende Rahmen gleicht sich dank eines Elektromotors einfach und mühelos der Körpergröße des Anwenders an. Der Anwender selbst kann auch, in schon stehender Haltung, schnell und einfach und ohne Mitwirkung von Hilfspersonal diese Einstellung vornehmen. Gleichzeitig werden Knie-, Seiten- und Oberkörperstützen, zu vermehrter Sicherheit und Komfort des Anwenders, eingestellt.



Für mehr Information :



**GREEN MEDICAL**

Medizintechnik J. Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg



DEUTSCHE VERSION

# Struzzo

## AUFRECHT UND MOBIL

Eine Version :  
Dieser Sitztyp erleichtert den Transfer vom Rollstuhl  
auf das Gerät.

Zusätzlich kann eine speziell geformte Sitztasche (Zubehör Art.N. AC0048) benutzt werden.

Art.N. AV 23 3420




### ANBRINGUNG DER GEFORMTEN SITZTASCHE Zur weiteren Vereinfachung der Zugänglichkeit

<3> Der verlängerte Sitz wird in die, unter dem Antidekubitus Kissen angebrachte geformte Sitztasche eingefügt. Es wäre angebracht, das während dieses Ablaufes, der Anwender durch Hilfspersonal unterstützt wird, falls die eigenen Kräfte nicht ausreichend sein sollten.



SITZTASCHE FUER VERLÄNGERTEN SITZ  
Zubehör für Art.N. AV23 3420 zur Transfer  
Erleichterung

### TECHNISCHE DATEN

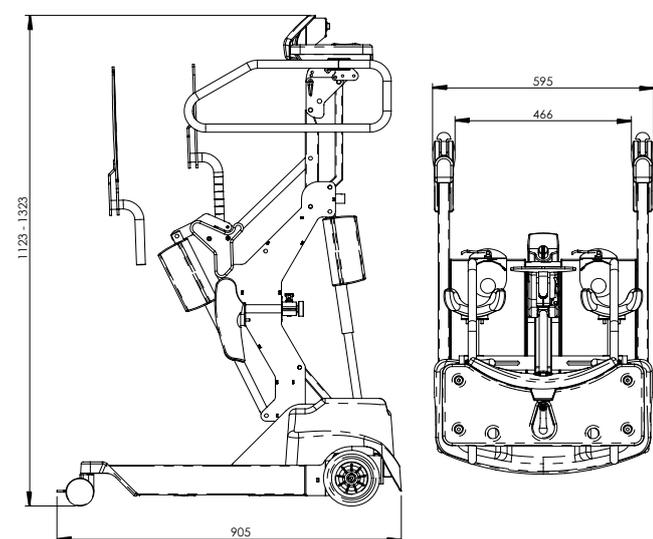

BESCHREIBUNG	SERIE STRUZZO
Oberkörperabstützung	Beweglich – aufrichtbar
Vertikalisierung servounterstützt	Elektrisch
Höhenverstellung des Hilfsmittels	Elektrisch
Überlastungsschutz	Elektronisch
Überlastungssignal	Akustisch
Bremsen	Rollen hinten
Höchstgeschwindigkeit	2,5 km/h (einstellbar)
Freiraumhöhe unter der Struktur	31 mm
Maximal überwindbare Stufenhöhe	20 mm
Maximal überwindbare Schräge	2 Grad
Arbeitszeiten (aufrichten/transfer)	3 – 4 Tage normaler Gebrauch (2,5 Std ununterbrochene Fortbewegung)
Durchschnittliche Ladezeit Batterie	8 Std
Anzeige Ladestatus Batterie	Multi-color display auf dem Joystick
Geschwindigkeitseinstellung	Digital auf dem Joystick
Automatische Abschaltung	Standard
Fehlersuche und Wartung	Über das Display
Notstop Schalter	Standard
Notstop-Aus Schalter	Standard

Die STRUZZO Geräte können mit einer Serie von Zubehör ausgestattet werden.

