

Aqua Relax Gebärwanne
Gebärsaal- und Entspannungswanne



Aqua Relax – Gebärwanne

Gebärsaal- und Entspannungswanne

Wir, das Team von Vivipar, haben es uns zum Ziel gesetzt, mit unseren innovativen Produkten beste Voraussetzungen für eine familienfreundliche Geburt zu schaffen.

Wanne mit Tür



- Die Wannenür garantiert der Schwangeren ein sicheres und bequemes Ein- und Aussteigen.

- Die Sicherheitsspannverschlüsse verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen der Wannenür.

Wanne ohne Tür mit Treppenpodest




- Die Trittsufen haben eine rutschhemmende Oberfläche. Durch Einschieben in die Fußaussparung der Außenverkleidung wird eine zusätzliche Kippsicherheit gewährt.

- Das Treppenpodest mit optionalem Handlauf ermöglicht der Gebärenden einen sicheren Ein- und Ausstieg.




- Der Einsatzsitz dient als Ein- und Ausstiegshilfe sowie als Fußstütze in der Wanne. Über die beiden Griffe kann er leicht aus der Wanne genommen werden.

Wasserzulauf

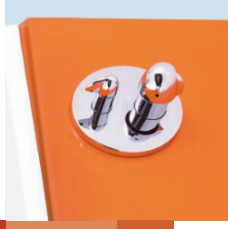

- Die Thermostat-Mischbatterie sorgt beim Befüllen der Wanne für eine konstant geregelte Wassertemperatur.

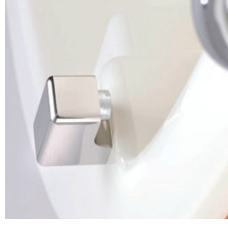

- Der Standard Einlaufhahn mit Perlator garantiert einen angenehmen ruhigen und weichen Wasserzulauf.

Wannendämmung



- Dämmung
Die Entbindungswanne kann optional mit einer Wärmedämmung ohne das Wannenheizsystem ausgestattet werden. Somit wird ein schnelles Abkühlen des Wassers verhindert.

Bakterienfilter



- Pall Einlaufhahn mit zwei endständigen Wasserfiltern. Als Einwegfilter bis max. 30 Tage verwendbar. Einfaches Abdrehen über den Schnellverschluss.

Zubehör



- Wannensitzkissen mit anschießbarer Füllung aus Quarzsand sorgt für eine weiche, bequeme Sitzfläche in der Wanne.
Länge 470 mm - Breite 270 mm



- Das Wasserstrickkissen ist aus einer wasserdichten, hautfreundlichen Folie gefertigt. Es wird mit Wasser gefüllt und dient als Unterlage zum Knien oder Sitzen. Zum Gebrauch als Entspannungskissen ist es auf Wunsch auch mit Thermoperlenfüllung erhältlich.
Länge 430 mm - Breite 430 mm



- Wannemackenrolle - Die nützliche Kopfunterstützung für die Frau beim Entspannen in der Wanne. Die Form passt sich dem Halsbereich sehr gut an. Gefüllt mit Thermoperlen erhält die Nackenrolle Auftrieb und schwimmt so auf dem Wasser.
Länge 800 mm - Breite 700 mm

Farben der Wanne

- Wählen Sie Ihre individuelle Wannenfarbe nach dem RAL Classic-Farbschema.



Technische Daten

Gesamtlänge	1735 mm
Gesamtbreite	1250 mm
Gesamthöhe	750 mm
Gewicht leer	80 kg
Füllvolumen	250 Liter
Wasseranschluss:	
Kaltwasserzulauf	3/4 Zoll innen
Warmwasserzulauf	3/4 Zoll innen
Wasserabflussschlauch	50 mm



- Die Gebärwanne Aqua Relax ist konzipiert, produziert und montiert gemäß den Sicherheitsvorschriften und Hygienebestimmungen.
DIN VDE 0100/701 und DVGW



Unser komplettes Programm

Alle unsere Produkte werden für die speziellen Anforderungen eines modernen Kreißsaales entwickelt und hergestellt.

Die Betreuung erfolgt ausschließlich durch unsere erfahrenen Berater und Techniker.

Gerne begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.



Pandere das breite Entbindungsbett



Classic das klassische Entbindungsbett



Innova das funktionelle Entbindungsbett



Vitalux
Gebärlandschaft



Aqua Relax
Gebärwanne



Stühle
Gebär-, Still-, Pezziballstuhl



Haltesysteme
Deckenhaken, Haltetücher

