

# Infusionsständer Premium Care

Doppelrollen Ø 75 mm

**provita**<sup>®</sup>  
medical


I-PRE001



- + effektive Infusions-Versorgung durch sicheres Aufhängen von Infusionsflaschen und -beuteln
- + mobil einsetzbar: zur rechten Zeit, am rechten Ort
- + sehr hohe Belastbarkeit durch die Verarbeitung von hochwertigen Materialien

## Produktbeschreibung


Material:	Edelstahl / Aluminium
Farbe der Kunststoffteile:	schwarz
Flaschenkreuz:	Edelstahl 4 Sicherheitsflaschenhaken - 2 kg / Haken
Arretierung:	Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
Höhenverstellbereich:	1.500 mm - 2.350 mm
Rohrdurchmesser:	25 / 18 mm
Länge Außenrohr:	1.200 mm
Fußdurchmesser:	630 mm
Auslegerprofil:	Ø 33,7 mm
Gesamtbelastbarkeit:	18 kg (2 kg pro Haken / 10 kg Außenrohr)
Rollen:	Doppellaufrollen Ø 75 mm, entsprechend DIN EN 60601 elektrisch leitfähig und feststellbar
Gesamtgewicht (Netto):	ca. 11 kg, inkl. Fußbeschwerung

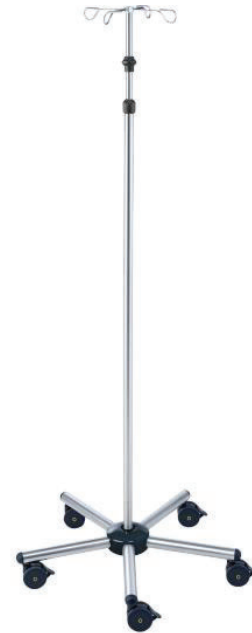

**GREEN  
MEDICAL**  
Medizintechnik J. Schmuck  
GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg

# Infusionsständer Premium Care

Doppelrollen Ø 75 mm

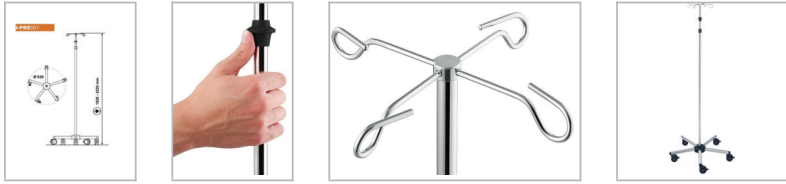

## Anwendung

- + das Außenrohr bietet genug Platz, um diverse Geräte in nutzerfreundlicher Bedienhöhe zu befestigen

## Technik

- + alle Kunststoffteile sind lichtecht
- + nichtrostende Edelstahlrohre nach DIN EN 10217-7
- + Material Ultraschall- und Wirbelstrom-geprüft (nach EN 10246-9/3)

## Ökonomie

- + vollständige Recyclebarkeit
- + kompakte Verpackung = kostengünstige Versendung

## Sicherheit

- + Ausleger sind mit Stopfen aus Kunststoff verschlossen (keine Verletzungsgefahr)
- + ausreichender Sicherheitsabstand in komplett eingeschobenen Zustand als Vorsichtsmaßnahme vor Verletzungsgefahr (z.B. Finger einklemmen)
- + polierte, zylinderförmige Ausleger am Rollfuß reduzieren die Ablagerungsfläche für Schmutz und Keime



 **GREEN MEDICAL**  
Medizintechnik J.Schmuck

GREEN MEDICAL Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25, A - 8755 St. Peter ob Judenburg