

Domus e-move Soft

15032 In aller Seelenruhe und Gemütlichkeit optimalen Sitzkomfort genießen: Das ist der Kerngedanke des Domus Ruhesessels. Dank des Classic Mechanismus können Sitzfläche und Rückenlehne mit minimalem Kraftaufwand und ohne Hebel nach hinten verstellt werden.

Gestell

- Die abgerundeten Seitenteile sind aus 2 OSB-Platten (Dicke: 18 mm) hergestellt und mittels ein Stahlkonstruktion stark mit einander verbunden.
- Die Seitenteile sind komplett mit feuerhemmendem Schaum und doppelter Steppnaht gepolstert.
- Komfortable breite Armlehnen von ± 10 cm.
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- Keine sichtbare Befestigungspunkte.
- Beine aus massiven Buchenholz, mit Gleitern aus Kunststoff ausgestattet.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Der abgerundete Sitz vorn behindert den Blutkreislauf nicht.
- Komfortable Sitzhöhe (45 cm)
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.

Rückenlehne

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 3 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Mit einem höhenverstellbaren und abnehmbaren Kopfstütz-/Nackenkissen ausgestattet.

Beinstütze

- Schichtholz, Dicke 10 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert.

Verstellbare Positionen

- Zwei Antriebs Elemente kippen die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine 'Zero Gravity' Position.
- Die Rückenlehne und Beinstütze können auch individuell verstellt werden.
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 97° (Sitzposition) und 120° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 24 Grad, wenn der Relaxmechanismus aktiviert wird.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.
- Der Fero e-move lässt sich mittels einer integrierten Bedienung auf der Außenseite der Armlehne einfach betätigen. Eine Handbedienung mit Kabel ist auch erhältlich (option).

Farben



Bitte Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.



Maße

15032 | Domus e-move Soft:

- 76 x 79 x H 115 cm
- Sitzhöhe: 45 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 52 cm
- Höhe der Armlehnen: 66 cm
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

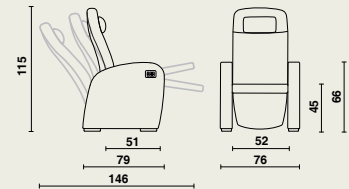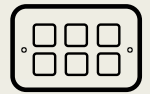

Materialien und Gestaltung

- **Holz:** Buche (massiv), Schichtholz, MDF-Platte, OSB-Platte.
- **Metall:** epoxybeschichtet (hellgrau).
- **Feuerhemmender Schaum.**
- **Bezug:** siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen:** Bitte Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen und Zubehör

- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Anatomisches Reduktionskissen.
- Ohrenbacken.
- Befestigungsbügel.
- Infusionsständer.
- Hülse für Infusionsständer.
- Versteckte Doppelaufrollen vorn $\varnothing 32$ mm, hinten $\varnothing 50$ mm mit Bremse.
- Batterie.
- Laufrollen $\varnothing 100$ mm mit Bremse.
- Laufrollen $\varnothing 100$ mm mit Bremse und Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze aus Kunststoff (mit Laufrollen $\varnothing 100$ mm)
- Handbedienung mit Kabel.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.

