

# Mauro Metallruhesessel

**18900** Der Mauro Ruhesessel mit höhenverstellbaren Armlehnen und Laufrollen ist mit einem Relaxmechanismus ausgestattet, der speziell für den Pflegesektor entwickelt worden ist. Der Duo-line Mechanismus ermöglicht es, die Rückenlehne und Beinstütze separat zu verstellen.

## Gestell

- Solide, geschweißte Metallkonstruktion.
- Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.
- 4 Integral S Design Laufrollen Ø 125 mm mit Präzisionskugellagern. Die 2 hinteren Laufrollen haben einen zentralen Bremsmechanismus mit Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze mit Kippschutz, aus Kunststoff mit Antirutsch-Struktur.

## Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Zwei Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Der Sitz vorn ist abgerundet, so dass Blutkreislauf optimal bleibt.
- Komfortable Sitzhöhe von 46 cm bis zur Fußstütze.
- Gepolstert mit Doppelsteppnaht.

## Rückenlehne

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Sperrholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Zwei Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit Doppelsteppnaht.
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne.

## Beinstütze

- Beinstütze aus Sperrholz, Dicke 10 mm, mit feuerhemmendem Schaum, und komplett gepolstert.

## Duo-line Mechanismus

- Ermöglicht es, die Rückenlehne und Beinstütze separat zu verstellen. Die Rückenlehne kann mittels eines Hebels auf der rechten Seite geneigt werden. Die Beinstütze kann mittels eines Hebels auf der linken Seite geneigt werden.
- Verriegelung in jeder Position möglich.
- Der Sitz kippt bis zu 20 Grad, wenn der Relaxmechanismus betätigt wird.
- Die Gasfedern minimieren die benötigte Betätigungskraft des Mechanismus.
- Dank der teleskopischen Beinstütze werden die Beine optimal unterstützt.

## Höhenverstellbare Armlehnen

- Ergonomische Armlehnen aus Kunststoff erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Essbrettbefestigungen gehören zur Standardausstattung.
- Höhenverstellbar in 4 Positionen mittels 2 massiver Stahlachsen.
- Verriegelung nach unten, mittels eines Federhebels.
- In niedrigster Position auf gleicher Höhe mit der Sitzfläche.

## Farben

Unser reichhaltiges Angebot an Farben steht Ihnen zur Verfügung.  
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

## Zubehör


Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.



## Maße

### 18900 | Mauro Metallruhesessel

- 72 x 78-155 x H 125 cm
- Sitzhöhe bis zur Fußstütze: 46 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 53,5 cm
- Höhe der Armlehnen: 73,5-53 cm
- Sichere Arbeitslast: 150 kg

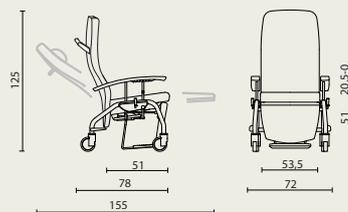

## Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau).
- Holz: Sperrholz, MDF-Platte.
- Kunststoff.
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

## Optionen

- Verriegelung des Bedienungshebels.
- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Verbreitete schwenkbare Armlehnen.
- Zubehörhaken.
- Befestigungsbügel.
- Ohrenbacken.
- Infusionsständer.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Designbremse mit zweiseitigem Pedal.
- Esstableshalter an der Rückenlehne.
- Abnehmbares und verstellbares Kopf/ Nackenkissen.
- Individuelle Bremse vorn.



# Mauro Metallruhesessel

**16930** Der Mauro Ruhesessel mit höhenverstellbaren Armlehnen und Laufrollen ist mit einem Relaxmechanismus ausgestattet, der speziell für den Pflegesektor entwickelt worden ist. Der Ergo-line Mechanismus kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine "Zero Gravity" Position.

## Gestell

- Solide, geschweißte Metallkonstruktion.
- Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.
- 4 Integral S Design Laufrollen Ø 125 mm mit Präzisionskugellagern. Die 2 hinteren Laufrollen haben einen zentralen Bremsmechanismus mit Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze mit Kippschutz, aus Kunststoff mit Antirutsch-Struktur.

## Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Zwei Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Der Sitz vorn ist abgerundet, so dass Blutkreislauf optimal bleibt.
- Komfortable Sitzhöhe von 46 cm bis zur Fußstütze.
- - Komplette gepolstert mit Doppelsteppnaht.

## Rückenlehne

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Sperrholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Zwei Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplette gepolstert mit Doppelsteppnaht.
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne.

## Beinstütze

- Beinstütze aus Sperrholz, Dicke 10 mm, mit feuerhemmendem Schaum, und gepolstert.

## Ergo-line Mechanismus

- Kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine "Zero Gravity" Position (\*).
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 97° (Sitzposition) und 120° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 24 Grad, wenn der Relaxmechanismus betätigt wird.
- Eine Gasfeder minimisiert die benötigte Betätigungskraft des Mechanismus.
- Verriegelung in jeder Position möglich, mittels eines Hebels, der von beiden Seiten einfach zu betätigen ist.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.

## Höhenverstellbare Armlehnen

- Ergonomische Armlehnen aus Kunststoff erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Esstrettbefestigungen gehören zur Standardausstattung.
- Höhenverstellbar in 4 Positionen mittels 2 massiver Stahlachsen.
- Verriegelung nach unten, mittels eines Federhebels.
- In niedrigster Position auf gleicher Höhe mit der Sitzfläche.

## Farben

Unser reichhaltiges Angebot an Farben steht Ihnen zur Verfügung.  
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

## Zubehör

Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(\* "Zero Gravity" Position: Diese Sitz-/Liegeposition ist auf Daten der NASA gegründet. In dieser neutralen Körperposition befinden alle Muskelkräfte sich in einem biomedizinischen Gleichgewicht. Quelle: "From outer space to you", Omni, März 1994.




**GREEN MEDICAL**  
Medizintechnik J. Schmuck  
Furth 25 | A - 8755 St. Peter ob Judenburg  
+ 43 3579 21012 • www.greenmedical.at



## Maße

### 16930 | Mauro Metallruhesessel

- 72 x 78-155 x H 125 cm
- Sitzhöhe bis zur Fußstütze: 46 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 53,5 cm
- Höhe der Armlehnen: 73,5-53 cm
- Sichere Arbeitslast: 150 kg

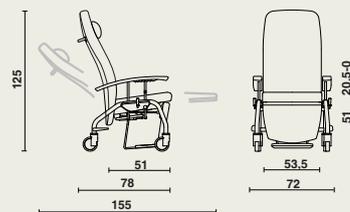

## Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau).
- Kunststoff.
- Holz: Sperrholz, MDF-Platte.
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

## Optionen

- Verriegelung des Bedienunghebels.
- Manuell einstellbare Beinstütze.
- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Verbreitete schwenkbare Armlehnen.
- Zubehörhaken.
- Befestigungsbügel.
- Ohrenbacken.
- Infusionsständer.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Designbremse mit zweiseitigem Pedal.
- Esstretthalter an der Rückenlehne.
- Abnehmbares und verstellbares Kopf-/ Nackenkissen.
- Individuelle Bremse vorn.

# Mauro E-move

**19102** Der Mauro Ruhesessel mit höhenverstellbaren Armlehnen und Laufrollen ist mit einer elektrisch verstellbaren Beinstütze und Rückenlehne ausgestattet, die sich mittels einer intuitiven Handbedienung einfach betätigen lassen.

## Gestell

- Solide, geschweißte Metallkonstruktion.
- Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.
- 4 Integral S Design Laufrollen Ø 125 mm mit Präzisionskugellagern. Die 2 hinteren Laufrollen haben einen zentralen Bremsmechanismus mit Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze mit Kippenschutz, aus Kunststoff mit Antirutsch-Struktur.

## Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Zwei Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Der Sitz vorn ist abgerundet, so dass Blutkreislauf optimal bleibt.
- Komfortable Sitzhöhe von 46 cm bis zur Fußstütze.
- Gepolstert mit Doppelsteppnaht.

## Rückenlehne und Beinstütze

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Sperrholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. Zwei Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit Doppelsteppnaht.
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne.
- Beinstütze aus Sperrholz, Dicke 10 mm, mit feuerhemmendem Schaum, und komplett gepolstert.

## Höhenverstellbare Armlehnen

- Ergonomische Armlehnen aus Kunststoff erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen.
- Essbrettbefestigungen gehören zur Standardausstattung.
- Höhenverstellbar in 4 Positionen mittels 2 massiver Stahlachsen.
- Verriegelung nach unten, mittels eines Federhebels.
- In niedrigster Position auf gleicher Höhe mit der Sitzfläche.

## E-move Mechanismus

- Zwei Antriebs Elemente kippen die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine 'ZeroGravity' Position.
- Die Rückenlehne und Beinstütze können auch individuell verstellt werden.
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 97° (Sitzposition) und 120° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 24 Grad, wenn der Relaxmechanismus aktiviert wird.
- Optimale Beinunterstützung dank der teleskopischer Beinstütze.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.
- Der Fero e-move lässt sich mittels einer intuitiven Handbedienung einfach betätigen.



## Farben

Unser reichhaltiges Angebot an Farben steht Ihnen zur Verfügung.  
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.

## Zubehör


Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.



## Maße

### 19102 | Mauro Metallruhesessel

- 72 x 78-155 x H 128 cm
- Sitzhöhe bis zur Fußstütze: 46 cm
- Sitzhöhe ohne Fußstütze: 50 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Höhe der Armlehnen: 70,5-50 cm
- Sichere Arbeitslast: 150 kg

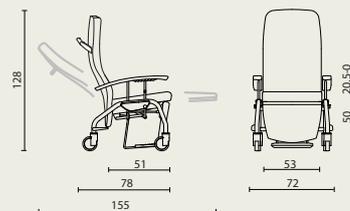

## Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet (hellgrau).
- Holz: Sperrholz, MDF-Platte.
- Kunststoff.
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien.

## Optionen

- Sitzpolster mit viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug.
- Verbreitete schwenkbare Armlehnen.
- Zubehörhaken.
- Befestigungsbügel.
- Ohrenbacken.
- Infusionsständer.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Designbremse mit zweiseitigem Pedal.
- Batterie.
- Esstablethalter an der Rückenlehne.
- Abnehmbares und verstellbares Kopf/ Nackenkissen.
- Rollen Linea Ø 65 mm, individuelle Bremse, ohne Fußstütze.
- Rollen Levina Ø 100 mm, individuelle Bremse.
- Rollen Integral S Ø 125 mm Individuelle Bremse vorn.
- Rollen Ø 300 mm

