

WIE WÄHLEN?



Bitte gehen Sie wie folgt vor, um den ZenSo E-lift nach Ihrem Wunsch zusammenzustellen.

01. FUSSGESTELL



Ohne Rollen



Rollen Ø 100 mm mit zentraler Bremse und automatischer Bremsbetätigung

02. ARMLEHNEN



Gepolsterte Seiten



Gepolsterte Seiten mit Armlehnen aus Kunststoff



Gepolsterte Seiten mit Armlehnen aus Holz




Absenkbare Armlehnen aus Kunststoff



Absenkbare Armlehnen aus Holz

03. BEDIENUNG

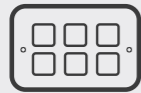

Integrierte Bedienung (nur mit gepolsterten Seiten)



Handbedienung

04. SITZHÖHE UND SITZTIEFE



Sitzhöhe

45 cm

47,5 cm



Sitztiefe

46 oder 50 cm

50 cm

Geeignet für Körpertyp

<176 cm

>176 cm

Haelvoet | Belgien
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T +32 (0) 51 48 66 95
F +32 (0) 51 48 73 19
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

ZENSO BIETET ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN und Sie entscheiden

Die ZenSo Kollektion enthält ein schönes Angebot an Sesseln, die in jeder Umgebung passen. Wählen Sie Ihren bevorzugten Relaxmechanismus, Fußgestell, Verarbeitung und Materialien, und stellen Sie einen Sessel zusammen, der Ihren Wünschen und Bedürfnissen völlig entspricht.



Scannen und entdecken Sie wie der ZenSo E-lift einen Transfer vereinfacht



ZENSO E-LIFT

Relaxessel Kollektion





15 Ergonomie

14 feuerhemmender Schaum

13 universeller Komfort

12 abnehmbarer Sitz

11 Kombination Sitzhöhe / Sitztiefe

10 modular

09 Doppelrollen

01 E-lift System

02 absenkbare Armlehnen

03 teleskopische Beinstütze

04 erstklassige Verarbeitung

05 magnetische Stromverbindung

06 automatische Bremse

08 zentrale Bremse

07 kompakte Basis

ZENSO E-LIFT

Vorteile

01. E-LIFT SYSTEM

Richtige Hilfe beim Aufstehen

Die Liftfunktion des ZenSo E-lift Sessels unterstützt den Benutzer bestmöglich wenn er völlig sitzen oder aufstehen will.

02. ABSENKBARE ARMLEHNEN

Vereinfacht Transfers

Zwei Armlehnstangen garantieren eine stabile Verstellung der Armlehnen (4 Positionen) und vermeiden, dass der Benutzer lateral unter die Armlehne schiebt. Ein Esstisch kann an den Armlehnen befestigt werden.

03. TELESKOPISCHE BEINSTÜTZE

Optimale Unterstützung

Während der Neigung verlängert die Beinstütze sich um 70 mm. Diese Funktion unterstützt die Beine optimal und entfernt Falten in den Kniekehlen, die Dekubitus verursachen können.

04. ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG

Qualität und benutzerfreundlich

Sitz und Beinstütze sind völlig gepolstert, auch auf der Unterseite. Erstklassige Verarbeitung, dank der Doppelnaht. Die Abwesenheit von Reißverschlüssen und Klammern vereinfacht die Reinigung.

05. MAGNETVERBINDUNG

Abroll-sicherung

Dank der magnetischen Stromverbindung ist der ZenSo Sessel mit einer Abroll- und Stolpersicherung ausgestattet.

06. AUTOMATISCHE BREMSE

Sicherheit über alles

Wenn die Liftfunktion betätigt wird, wird auch das Bremssystem SafeBrake automatisch betätigt, so dass die Rollen automatisch gebremst werden.

07. KOMPAKTE BASIS

Weniger Stolperrisiko

Die kompakte Sesselbasis sorgt dafür, dass einfach verschoben werden kann. Darüber hinaus gibt es auch weniger Risiko, um über das Fußgestell zu stolpern.

08. ZENTRALBREMSE

Betätigung in einer Bewegung

Die zentral gebremsten Rollen können sehr sanft in einer Bewegung betätigt werden, mittels eines ergonomischen Bremspedals, das sich auf der Vorder- und Hinterseite des Sessels befindet.

09. DOPPELROLLEN

Bessere Manövrierfähigkeit

Die Tente Doppelrollen Ø 100 mm bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit, dank dem äußerst niedrigen Roll- und Schwenkwiderstand.

10. MODULAR

Nach Ihren Wünschen

Der Relaxsessel kann völlig nach Ihrem Wunsch zusammengestellt werden. Ein reichhaltiges Angebot an Zubehör macht den Sessel komplett. Beispiele sind eine abnehmbare Kopfstütze, einen Infusionsständer, Esstisch, Nackenkissen,...

11. KOMBINATION SITZHÖHE / SITZTIEFE

Benutzerspezifisch

Der ZenSo E-lift Sessel ist in zwei unterschiedlichen Sitzhöhen (45 cm oder 47,5 cm) und zwei Sitztiefen (46 cm oder 50 cm) erhältlich.

12. ABNEHMBARER SITZ

Wartungsfreundlich

Der Sitz und die Beinstütze können als eine Einheit entfernt werden, so dass der Sessel und Sitz gut gereinigt werden können. Darüber hinaus ist die Unterseite des Sitzes und der Beinstütze völlig gepolstert.

13. UNIVERSELLER KOMFORT

Ausgezeichnetes Design

Die Form der Rückenlehne unterstützt den unteren Rücken, die Schultern und den Kopf perfekt, so dass ein zusätzliches Nackenkissen nicht notwendig ist.

14. FEUERHEMMEND

Polsterung und Schaum

Der Schaum ist bis zum Kern feuerhemmend und garantiert auch eine bestmögliche Feuersicherheit wenn es Polsterschäden gibt.

15. ERGONOMIE

Schiebebügel und Richtungsfeststeller

Die Rollen mit Richtungsfeststeller befinden sich auf der Vorderseite des Sessels, so dass weniger Kraft notwendig ist, um den Sessel zu manövrieren. Der ovalförmige Schiebepögel sorgt für eine bestmögliche Taktilität.